

SHEER White!™

Complete Application Instructions

Instrucciones completas para su aplicación

Compléter les instructions d'application

Vollständige Anwendungsanleitung

Istruzioni Complete dell'Applicazione

Kompletní návod k použití

Komplet Påføringsvejledning

Täydelliset käyttöohjeet

Οδηγίες ολοκληρωμένης εφαρμογής

Teljes Alkalmazási Utasítás

Volledige Applicatie-instructies

Fullstendige instruksjer

Sposób użycia

Instruções de Utilização Completa

Istrucțiuni Complete de Aplicare

Instruktioner

تعليمات التطبيق الكاملة

Simple. Brite. White.®

15% Carbamide
Peroxide Whitening Film
5.5% Hydrogen Peroxide Equivalent

Description

Sheer White!® whitening films are the most comfortable, patient friendly whitening system available today. These films are designed to adhere to teeth for 1 to 2 hours to take advantage of the proprietary carbamide peroxide composition.

PLEASE NOTE: removal before 30 minutes can be done, but is more difficult, may tear and come off in pieces.

Counter Indications

- Do not smoke during whitening treatment.
- Avoid contact with eyes. If contact occurs flush with copious amounts of water.
- Avoid direct contact of the active surface of the film with the gums and/or salivary flow.
- Not for use by women who are pregnant or nursing.
- Not for use by children under 18 years of age.
- Avoid contact with clothing.
- Do not swallow the film.
- If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or mouth occurs, discontinue use and consult a dentist.
- If you brux or grind your teeth, do not wear overnight.
- Do not use if allergic to peroxides like hydrogen peroxide.
- Do not use for more than 5 days per regimen.
- Whitening will not affect porcelain crowns and veneers tooth colored acrylic restorations or amalgam.

Storage & Handling

- Keep the product refrigerated to maintain maximum shelf life.
- Do not store above 40°F (5°C). Do not freeze. Best use before date on label.
- Do not use if the packaging has been damaged, or if the seals are found to be broken or open.
- 15% initial concentration of carbamide peroxide. The concentration may change due to the nature of peroxide and this unique formulation.

Shelf Life: 36 months


	Attention - Refer to the instructions for use and complete information.
	Oxidizer - Avoid contact with reactive substances.
	Storage Temperature - Store product at the indicated temperature.



Remove the strip from the tray. Remove the white paper liner from the strip. The side of the strip that had the paper liner is the side to apply to the teeth.



Center film and place against teeth at gum line.

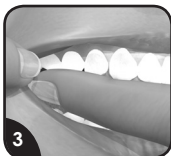


Pull cheek away and push film onto back teeth.



Fold film to back side of teeth. Press firmly on all surfaces.



To remove, grasp one corner and pull down away from front of teeth, then push film away from back of teeth.

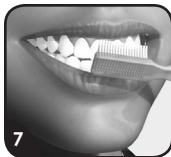

Brush or rinse away any remaining gel.
Rinse to sink.



Disclaimer: CAO Group believes this information to be accurate and is offered only for the benefit of its customers for use of the product under prescribed conditions. This document is not to be considered a warranty or guarantee of product performance, and CAO Group is not legally bound to such claims based on this document.

Descripción

La película blanqueadora Sheer White![®] es el sistema de blanqueamiento más cómodo y agradable disponible hoy en día. Estas películas están diseñadas para adherirse a los dientes durante 1 o 2 horas para aprovechar su exclusiva composición de peróxido de carbamida.

TENGA EN CUENTA QUE: se pueden retirar las películas antes de los 30 minutos, pero es más difícil y pueden romperse y desprenderse en pedazos.

Contraindicaciones

- No fumar durante el tratamiento blanqueador
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante cantidad de agua.
- Evitar el contacto directo de la superficie activa de la película con las encías y/o el flujo salival.
- No usar en mujeres embarazadas o en fase de lactancia.
- No usar en personas menores de 18 años.
- Evitar el contacto con la ropa.
- No tragar la película.
- En caso de irritación (enrojecimiento, hinchazón, dolor) de las encías o de la boca, interrumpir el uso y consultar a un dentista.
- Si los dientes le rechinan, no usar durante la noche.
- No usar en caso de alergia a peróxidos como el peróxido de hidrógeno.
- No usar más de 5 días seguidos.
- El blanqueamiento no afectará a las coronas de porcelana ni a las carillas, restauraciones acrílicas del color del diente o amalgamas.

Almacenamiento y manejo

- Mantener el producto refrigerado para aumentar la vida útil.
- No almacenar por encima de 5°C. Usar preferentemente antes de la fecha especificada en la etiqueta.
- No usar si el envase está dañado o si los precintos están rotos o abiertos.
- Concentración inicial de 15% de peróxido de carbamida. La concentración puede cambiar debido a la naturaleza del peróxido y de esta fórmula única.

Vida útil: 36 meses


	Atención - Consulte las instrucciones de uso para obtener información adicional.
	Oxidante - Evite el contacto con sustancias reactivas.
	Temperatura de almacenamiento-Almacene el producto a la temperatura indicada.



1
Retire la tira de la bandeja. Retire el forro de papel blanco de la tira. El lado de la tira que tenía el forro de papel es el lado que se aplica a los dientes.



2
Centrar la película y colocar contra los dientes en la línea de las encías.

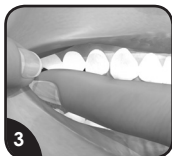

3
Tirar de la mejilla y empujar la película sobre la parte posterior de los dientes.




4
Doblar la película hacia el lado posterior de los dientes. Presionar con firmeza en todas las superficies.



5



6
Para retirar, sujetar una esquina y tirar hacia abajo desde la parte frontal de los dientes, luego empujar la película desde la parte posterior de los dientes.

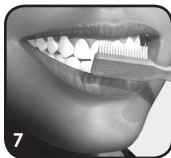

7
Cepillar o enjuagar cualquier resto de gel. Enjuagar abundantemente.



Aviso legal: CAO Group considera que esta información es precisa y se ofrece solo para el beneficio de sus clientes para el uso del producto bajo las condiciones prescritas. Este documento no debe ser considerado como una garantía o como garantía de rendimiento del producto y CAO Group no está vinculado legalmente a reclamaciones basadas en dicho documento.

Description

Sheer White![®] le blanchiment des films sont les plus confortables, le système de blanchiment amical des patients est disponibles aujourd'hui. Ces films sont conçus pour se conformer aux dents pendant 1 à 2 heures afin de profiter de la composition exclusive du peroxyde de carbamide.

VEUILLEZ NOTER : enlèvement avant 30 minutes peut être fait, mais il est plus difficiles, peut se déchirer et se détacher en morceaux.

Contre-indications

- Ne pas fumer pendant le traitement du blanchiment.
- Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment avec de grandes quantités d'eau.
- Eviter le contact direct de la surface active de la pellicule avec les gommages et / ou le flux salivaire.
- Ne pas utiliser par des femmes qui sont enceintes ou qui allaitent.
- Ne pas utiliser par des personnes de moins de 18 ans.
- Eviter le contact avec les vêtements.
- Ne pas avaler le film.
- En cas d'irritation (tels que rougeur, gonflement, douleur) des gencives ou de la bouche, cesser l'utilisation et consulter un dentiste.
- Si vous brossez ou grincer les dents, ne portez pas la nuit.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie aux peroxydes comme le peroxyde d'hydrogène.
- Ne pas utiliser pendant plus de 5 jours par régime.
- Le blanchiment n'affectera pas les facettes et couronnes en porcelaine, restaurations de dents colorées acryliques ou amalgame.

Storage & Handling

- Garder le produit au réfrigérateur pour conserver la durée de conservation maximale.
- Ne pas stocker au-dessus de 5 ° C. Ne pas congeler. Mieux vaut utiliser avant la date sur l'étiquette.
- Ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé, ou si les joints se trouvent à être brisés ou ouverts.
- 15% de la concentration initiale du peroxyde de carbamide. La concentration peut changer en raison de la nature du peroxyde et cette formulation unique.

Durée de conservation: 36 mois


	Attention - Reportez-vous à la notice d'utilisation et des informations complètes.
	Oxydant - Eviter le contact avec des substances réactives.
	Température de stockage - Conserver le produit à la température indiquée.



Retirez la bande du plateau. Retirez la doublure blanche en papier de la bande. Le côté de la bande qui avait la doublure en papier est le côté à appliquer sur les dents.



Centrer le film et le placer contre les dents sur l'alignement des gencives.

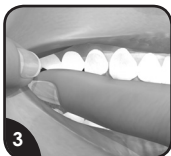

Tirez la joue et pousser film sur les dents arrière.




Repliez le film à la face arrière des dents. Appuyez fermement sur toutes les surfaces.



**Porter
1-2 heures**



Pour l'enlever, saisir un coin et tirer vers le bas à une distance de l'avant des dents, puis poussez le film loin de l'arrière des dents.

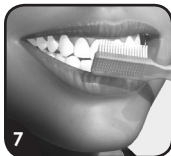

Brosser ou rincer tout gel restant. Rinçage à couler.



Avertissement : CAO Group croit que cette information est exacte et est offert uniquement dans l'intérêt de ses clients pour l'utilisation du produit dans des conditions prescrites. Ce document ne doit ne pas être considéré comme une garantie ou une garantie de performance du produit, et le CAO Group n'est pas légalement tenue de telles réclamations fondées sur ce document.

Beschreibung

Sheer White!® Zahnaufhellungsfolien sind das bequemste und kundenfreundlichste Verfahren zur Zahnaufhellung, das heutzutage erhältlich ist. Diese Folien sind darauf ausgelegt, 1 bis 2 Stunden an den Zähnen zu haften, um die patentgeschützte Carbamidperoxidverbindung optimal zu nutzen.

BEACHTEN SIE BITTE: Eine Entfernung vor dem Ablauf von 30 Minuten kann vorgenommen werden, ist jedoch schwieriger und führt möglicherweise zu einem Reißen der Folie, wodurch diese sich dann nur in kleinen Stücken ablösen lässt.

Gegenanzeigen

- Während der Aufhellungsbehandlung nicht rauchen.
- Augenkontakt vermeiden. Sollte es doch dazu kommen, Augen mit reichlich Wasser ausspülen.
- Unmittelbaren Kontakt der mit dem Wirkstoff beschichteten Oberfläche der Folie zu Zahnfleisch und / oder Speichel vermeiden.
- Nicht zu Verwenden bei Schwangerschaft oder während des Stillens.
- Nicht von Minderjährigen zu verwenden.
- Kontakt zur Kleidung vermeiden.
- Folie nicht schlucken.
- Bei Auftreten von Reizungen (wie Rötung, Schwellung, Schmerzen) des Zahnfleisches oder des Mundes Behandlung abbrechen und eine Zahnärztin / einen Zahnarzt aufsuchen.
- Bei Zähneknirschen oder -pressen nicht über Nacht tragen.
- Bei Peroxidallergie etwa gegen Wasserstoffsuperoxid nicht verwenden.
- Nicht länger als 5 Tage je Behandlungszyklus verwenden.
- Die Aufhellung hat keine Wirkung auf Porzellankronen und -verblendungen sowie auf zahnfarbige Acrylrestaurationen oder Amalgam.

Aufbewahrung und Handhabung

- Gekühlt lagern, um die größtmögliche Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Nicht bei Temperaturen über 5°C lagern. Nicht tiefkühlen. Vor dem aufgedruckten Haltbarkeitsdatum verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder die Versiegelungen nicht einwandfrei oder offen sind.
- Die anfängliche Carbamidperoxidkonzentration beträgt 15%. Sie kann sich aufgrund der Beschaffenheit des Peroxids und wegen der einzigartigen Rezeptur verändern.

Haltbarkeit: 36 Monate


	Achtung–Ziehen Sie die Anwendungsanleitung und die vollständigen Produktangaben zu Rate.
	Oxidationsmittel–Vermeiden Sie den Kontakt zu reaktionsfreudigen Stoffen.
	Lagertemperatur–Bewahren Sie das Produkt bei der angegebenen Temperatur auf.



Entfernen Sie den Streifen aus dem Fach. Entfernen Sie den weißen Papierträger vom Streifen. Die Seite des Streifens mit dem Papierträger ist die Seite, die auf die Zähne aufgetragen werden soll.



Folie zentrieren und an der Grenze zum Zahnfleisch an die Zähne anlegen.

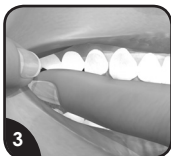

Die Wange zur Seite schieben und die Folie auf die Backenzähne aufbringen.




Folie zum Befestigen an der Hinterseite der Zähne umschlagen. Fest auf alle Kontaktflächen drücken.



**Tragezeit:
1 – 2 Stunden**



Zum Entfernen eine Ecke greifen und von der Vorderseite der Zähne abziehen, danach die Folie von der Zahnrückseite wegschieben.

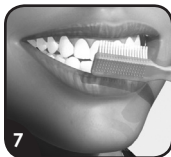

Verbleibendes Gel durch Putzen oder Ausspülen entfernen. Durch den Aussuss entsorgen.



Haftungsausschluss: Nach Überzeugung der CAO Group sind diese Angaben zutreffend und sollen ausschließlich den Kundinnen und Kunden bei der Verwendung des Produktes unter den oben dargestellten Bedingungen zugutekommen. Dieses Dokument stellt keine Gewährleistung oder Garantie der Leistung des Produktes dar, und die CAO Group haftet rechtlich nicht für Ansprüche auf der Grundlage dieses Dokumentes.

Descrizione

Sheer White![®] Le pellicole sbiancanti più confortevoli per i pazienti!

Studiate per aderire perfettamente ai denti per una durata dell'applicazione di 1-2 ore, così da trarre il massimo vantaggio dall'azione del perossido di carbamide.

ATTENZIONE: evitare di rimuovere la pellicola prima del tempo consigliato poichè potrebbe rompersi, causando una difficile rimozione.

Informazioni

- Non fumare durante il trattamento sbiancante.
- Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso di contatto, sciacquare gli occhi con abbondante acqua.
- Evitare il contatto diretto della la superficie attiva della pellicola con le gengive/o con la saliva.
- Non utilizzare in gravidanza o in fase di allattamento.
- Non usare su pazienti di età inferiore ai 18 anni.
- Evitare il contatto con gli indumenti.
- Non ingerire la pellicola.
- In caso di irradiazione alle gengive o alla bocca (arrossamento, gonfiore, dolore muscolare), interrompere l'utilizzo e consultare il proprio dentista.
- Se bruxate o digrigante i denti, non usare durante la notte.
- Non usare in caso di allergia ai perossidi come ad esempio il perossido d'idrogeno.
- Non usare oltre i 5giorni di trattamento.
- Lo sbiancamento non agisce su corone, intarsi, compositi e amalgama.

Conservazione

- Tenere il prodotto in frigo fino alla scadenza.
- Non conservare oltre i 5°. Non congelare. Non utilizzare oltre la data di scadenza
- Non usare se la confezione è stata danneggiata, o se il sigillo risulta rotto o aperto.
- 15% concentrazione iniziale di perossido carbammide. La concentrazione potrebbe cambiare a seconda della natura del perossido e della sua formulazione unica.

Data di scadenza: 36 mesi


	Attenzione – Leggere le istruzioni per l'utilizzo e per un'informazione completa.
	Ossidante -Vietato il contatto con sostanze reagenti.
	Temperatura di conservazione - Conservare il prodotto alla temperatura indicata.



1
Rimuovere la striscia dal vassoio. Rimuovere la carta bianca dalla striscia. Il lato della striscia che aveva la carta è il lato da applicare ai denti.



2
Posizionare al centro e applicare la pellicola seguendo la linea della gengiva.

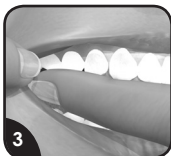

3
Sollevare la guancia per fare aderire perfettamente la pellicola ai denti posteriori.



4
Rivestire con la pellicola anche la superficie linguale del dente, premendo bene.



5
**Indossare per
1-2 ore**



6
Rimuovere la pellicola sollevandola da un angolo.



7
Lavare e risciacquare accuratamente.



Note legali: CAO Group ritiene che tali informazioni siano accurate ed è fornite solo a beneficio dei propri clienti per l'uso del prodotto secondo la prescrizione. Il presente documento non è da considerarsi una garanzia o una garanzia di prestazioni del prodotto, e CAO Group non è legalmente vincolata a tali azioni basate su questo documento.

Popis a návod

Bělící pásky SheerWhite!® jsou jedním z nejpohodlnějších a nejpříjemnějších systémů bělení aktuálně dostupných na trhu. Tyto pásky jsou speciálně vyvinuté tak, aby díky výbornému držení na zubech umožnily v době od 1 do 2 hodin úplné využití patentovaného složení karbamidu peroxidu.

UPOZORNĚNÍ: odstranění pásku dříve než po 30 minutách může být problematické a může docházet k protržení pásku.

Indikace (pokyny)

- Během doby bělení nekuřte.
- Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud ke kontaktu dojde, vypláchněte oči silným proudem vody.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu aktivní části pásku s dásní nebo slinami.
- Nevhodné pro těhotné nebo kojící ženy.
- Nevhodné pro děti do 18 let.
- Vyhněte se kontaktu s oblečením.
- Nepolykejte pásek.
- Pokud se během použití objeví citlivost, podráždění, svědění, bolest nebo zčervenání, odstraňte pásek a konzultujte s vaším stomatologem.
- Pokud skřípete zuby, nepoužívejte pásky během noci.
- Nepoužívejte v případě alergie na peroxidy (peroxid vodíku).
- Nepoužívejte déle než po dobu 5 dnů v jednom bělícím cyklu.
- Bělení neovlivní porcelánové korunky, umělé náhrady nebo amalgám.

Skladování a manipulace

- Pro zachování maximální trvanlivosti skladujte v lednici.
- Skladujte při teplotě do 5°C. Nezmrazujte. Minimální trvanlivost dle data uvedeného na obalu.
- Nepoužívejte, pokud je obal pásku porušený, netěsní nebo je otevřený.
- Počáteční koncentrace karbamidu peroxidu je 15%. Koncentrace se může měnit s ohledem na povahu peroxidů a složení výrobku.

Doba použitelnosti: 36 měsíců


	Pečlivě čtěte návod a informace.
	Oxidační činidlo - Vyhněte se kontaktu s reaktivními látkami.
	Teplota skladování - Produkt skladujte při uvedené teplotě.



Vyjměte proužek ze zásobníku. Odstraňte z pásu bílý papír. Strana pásu, který měl papír, je stranou, která má být aplikována na zuby.



Naložte film na místo na zuby na hranici dásně.

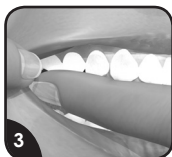


Vytáhněte tvář pryč a přitlačte film na zadní zuby.



Přeložte film na zadní straně zubů. Stiskněte pevně na všech površích.



Chcete-li odstranit, uchopte jeden roh a zatáhněte směrem dolů od předních zubů, a pak odtlačte filmu od zadní strany zubů.

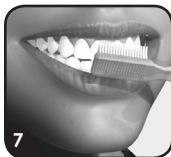

Kartáčem nebo opláchnutím odstraňte veškerý zbývající gel. Opláchněte.



Upozornění: CAO Group věří, že tato informace musí být přesná a je nabízena pouze ve prospěch svých zákazníků k použití výrobku přiřazených podmínek. Tento dokument nemá být považován za záruku nebo záruku vlastností výrobků, a CAO Group není právně vázána k těmto pohledávkám na základě tohoto dokumentu.

Beskrivelse

Sheer White!®-blegningsfilm er det mest komfortable, patientvenlige blegningssystem, der findes i dag. Disse film er beregnet til at klæbe sig til tænderne i 1 til 2 timer for at drage fordel af den proprietære carbamidperoxid-sammensætning.

BEMÆRK: fjernelse før 30 minutter kan gøres, men er mere vanskeligt, kan rives itu og falde af iflere stykker.

Kontraindikationer

- Der må ikke ryges under blegningsbehandling.
- Undgå kontakt med øjnene. Hvis kontakt forekommer, så skyl med rigelige mængder vand.
- Undgå direkte kontakt af den aktive overflade af filmen med tandkødet og/eller spytssekretion.
- Må ikke bruges af kvinder, der er gravide eller ammende.
- Må ikke bruges af personer under 18 år.
- Undgå kontakt med tøj.
- Du må ikke sluge filmen.
- Hvis irritation forekommer (såsom rødme, hævelse, ømhed) i tandkødet eller munden, ophør med brug og konsultér en tandlæge.
- Hvis du børster eller skærer tænder, så brug ikke natten over.
- Brug ikke hvis allergisk over for peroxider såsom hydrogenperoxid.
- Brug ikke mere end 5 dage pr. regime.
- Blegning vil ikke påvirke porcelænskroner og finérer, tandfarvede akrylrestaureringer eller amalgam.

Opbevaring & Håndtering

- Hold produktet nedkølet for at opretholde maksimal holdbarhed.
- Må ikke opbevares over 5°C. Må ikke fryses. Bedste brug før dato på etiketten.
- Brug ikke hvis emballagen er beskadiget, eller hvis forseglingerne er brudt eller åbne.
- 15% oprindelig koncentration af carbamidperoxid. Koncentrationen kan ændre sig på grund af arten af peroxid og denne unikke formulering.

Holdbarhed: 36 måneder


	Bemærk - Se brugsanvisningen og fuldstændige oplysninger.
	Oxidation - Undgå kontakt med reaktive stoffer.
	Opbevaringstemperatur - Produktet skal opbevares ved den angivne temperatur.



1 Fjern strimlen fra brønden. Fjern hvidpapirforingen fra strimlen. Den side af strimlen, der havde papirforingen, er den side, der skal anvendes til tænderne.



2 Centrér film og placér mod tænder ved tandkødslinjen.

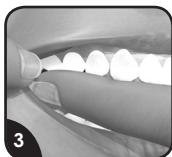

3 Træk kind væk og skub film på kindtænder.




4 Fold film til bagsiden af tænderne. Tryk fast på alle overflader.



Brug i
1-2 timer



6 For at fjerne, skal du gribe det ene hjørne og trække ned, væk fra forsiden af tænderne, og derefter skubbe filmen væk fra bagsiden af tænderne.

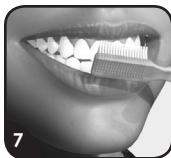

7 Børst eller skyl eventuel resterende gel væk. Skyl for at synke.

DA

Ansvarsfraskrivelse: CAO Group mener, at denne information er nøjagtig og tilbydes kun til gavn for dens kunder til brug af produktet under tilladte forhold. Dette dokument betragtes ikke som en garanti for produktets ydeevne, og CAO Group er ikke juridisk bundet til sådanne påstande baseret på dette dokument.

Kuvaus

Sheer White!®-valkaisukalvot ovat tällä hetkellä mukavin ja potilasystävällisin saatavilla oleva valkaisukeino. Nämä kalvot on suunniteltu kiinnittymään hampaisiin 1-2 tunnin ajaksi, jotta patentoitu karbamidiperoksidivalmiste pääsee vaikuttamaan.

HUOMAA: poistaminen 30 minuuttia ennen ajan loppumista on mahdollista mutta vaikeampaa, ja kalvo saattaa repeytyä ja irrota palasina.

Vasta-aiheet

- Älä tupakoi valkaisuhoitoa aikana.
- Vältä kosketusta silmiin. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä.
- Vältä kalvon aktiivisen pinnan kosketusta ikeniin ja/tai sylkeen.
- Ei raskaana olevien tai imettävien naisten käyttöön.
- Ei alle 18-vuotiaiden käyttöön.
- Vältä kosketusta vaatteisiin.
- Älä nielaise kalvoa.
- Jos ärsytystä (kuten punoitusta, turvotusta, arkuutta) ilmenee ikenissä tai suussa, lopeta käyttö ja kerro asiasta hammaslääkärille.
- Jos narskuttelet tai jauhat hampaitasi, älä käytä yön yli.
- Älä käytä, jos olet allerginen peroksideille, kuten vetyperoksidille.
- Älä käytä 5 päivää kauemmin yhden hoitojakson aikana.
- Valkaisu ei vaikuta posliinikruunuihin tai -pinnoituksiin, hampaanvärisiin akryylipaikkoihin tai amalgaamiin.

Säilytys&käsittely

- Pidä tuote jääkaapissa enimmäiskäyttöiän takaamiseksi.
- Älä säilytä yli +5°C:n lämpötilassa. Ei saa pakastaa. Parasta ennen -päivämäärä etiketissä.
- Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut tai jos sinetit ovat rikkoutuneet tai ne on avattu.
- 15% karbamidiperoksidikonsentraatti. Konsentraatio voi muuttua peroksidin luonteen ja valmisteen ainutlaatuisen koostumuksen vuoksi.

Käyttöikä: 36 kuukautta


	Huomaa–Katso käyttöohjeet ja täydelliset tiedot ohjeista.
	Hapetin–Vältä kontaktia reaktiivisten aineiden kanssa.
STORAGE  1°C 5°C	Säilytyslämpötila–Säilytä tuote määritellyssä lämpötilassa.



1 Poista nauha lokerosta. Irrota valkoinen paperi nauhasta. Nauhan puoli, jossa oli paperi- vuori, on puoli, jota käytetään hampaisiin.



2 Aseta kalvo hampaita vasten ienrajaa myötäillen.

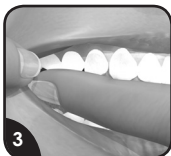

3 Vedä toisella kädellä poskea pois tieltä ja työnnä kalvo takahampaisiin.




4 Taita kalvo hampaiden takapuolelle. Paina se tiiviisti kaikkia pintoja vasten.



Pidä
1-2 tunnin
ajan



6 Poista tarttumalla yhdestä kulmasta ja vetämällä alaspäin hampaiden etupuolelta ja työnnä sitten kalvopois hampaiden takapuolelta.

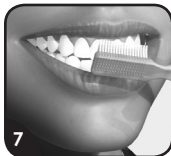

7 Harjaa tai huuhtelee pois mahdollinen jäljelle jäänyt geeli. Huuhtelee pesualtaaseen.



Vastuuvapauslauseke: CAO Group uskoo näiden tietojen olevan täsmällisiä ja ne tarjotaan vain asiakkaiden hyödyksi tuotteen käytössä määrättyissä olosuhteissa. Tätä asiakirjaa ei tule pitää takuuna tai vakuutuksena tuotteen tehokkuudesta, eikä laki sido CAO Groupia vastaavanlaisiin vaateisiin tämän asiakirjan pohjalta.

Περιγραφή

Οι λευκαντικές ταινίες Sheer White!® αποτελούν το πιο βολικό, εύχρηστο σύστημα λεύκανσης σήμερα. Αυτές οι ταινίες είναι σχεδιασμένες να κολλάνε στα δόντια για 1 έως 2 ώρες ώστε αυτά να επωφελούνται από τη σύνθεση με υπεροξείδιο του καρβαμιδίου.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Αφαιρούνται μετά από 30 λεπτά αλλά είναι πιο δύσκολο καθώς μπορεί να σχιστούν και να κοπούν σε κομμάτια.

Αντενδείξεις

- Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας λεύκανσης.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Αν το προϊόν έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Αποφεύγετε την απευθείας επαφή με την ενεργή επιφάνεια της ταινίας με τα ούλα ή/και το σάλιο σας.
- Να μην χρησιμοποιούνται από γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.
- Να μην χρησιμοποιούνται από άτομα κάτω των 18 ετών.
- Να αποφεύγεται η επαφή με τα ρούχα.
- Μην καταπίνετε τις ταινίες.
- Αν παρουσιαστεί ερεθισμός (όπως κοκκινίλα, πρήξιμο, πόνος) στα ούλα ή το στόμα, μη συνεχίσετε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν οδοντίατρο.
- Αν τρίζετε τα δόντια σας, μην φοράτε τις ταινίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Να μην χρησιμοποιούνται εάν είστε αλλεργικοί σε υπεροξείδια όπως υπεροξείδιο του υδρογόνου.
- Να μην χρησιμοποιούνται για πάνω από 5 μέρες ανά θεραπεία.
- Η λεύκανση δεν θα επηρεάσει πορσελάνινες κορώνες και όψεις πορσελάνης, επιδιορθώσεις από ρητίνη στο χρώμα του δοντιού ή αμαλγάματα.

Αποθήκευση και χειρισμός

- Φυλάξτε το προϊόν στο ψυγείο για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής του.
- Μην αποθηκεύετε τα προϊόν σε χώρους με πάνω από 5°C. Μην ψύχετε. Χρησιμοποιήστε το πριν την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην επικέτα.
- Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή αν σπάσει ή έχει ανοίξει.
- 15% αρχική συγκέντρωση υπεροξειδίου του καρβαμιδίου. Η συγκέντρωση μπορεί να αλλάξει λόγω της φύσης του υπεροξειδίου και της μοναδικής του σύνθεσης.

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες


	Προσοχή—Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τη χρήση και για ολοκληρωμένες πληροφορίες.
	Οξειδωτικό—Αποφεύγετε την επαφή με ουσίες που προκαλούν αντίδραση.
STORAGE  5°C 1°C	Θερμοκρασία αποθήκευσης—Αποθηκεύετε το προϊόν στη θερμοκρασία που υποδεικνύεται.



1
Αφαιρέστε τη λωρίδα από το δίσκο. Αφαιρέστε την επένδυση λευκού χαρτιού από την λωρίδα. Η πλευρά της λωρίδας που είχε την επένδυση χαρτιού είναι η πλευρά που εφαρμόζεται στα δόντια.



2
Κεντράρετε την ταινία και τοποθετήστε την στα δόντια στη γραμμή των ούλων.

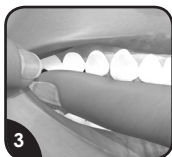

3
Τραβήξτε το μάγουλο και σπρώξτε την ταινία στα πίσω δόντια.



4
Διπλώστε την ταινία στην πίσω πλευρά των δοντιών. Πιέστε δυνατά σε όλες τις επιφάνειες.



5
**Φοράτε
1-2 ώρες**



6
Για να την αφαιρέσετε, πιάστε τη μία γωνία και τραβήξτε προς τα κάτω από τα μπροστινά δόντια, στη συνέχεια σπρώξτε την ταινία από το πίσω μέρος των δοντιών.



7
Βουρτσίστε ή ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα τζελ. Ξεπλύνετε στον νιπτήρα.



Αποποίηση ευθύνης: Ο Όμιλος CAO Group θεωρεί ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και παρέχονται προς όφελος των πελατών της για χρήση του προϊόντος ανάλογα με τους όρους απαγόρευσης. Το έγγραφο αυτό δεν θεωρείται εγγύηση απόδοσης του προϊόντος και ο Όμιλος CAO Group δεν φέρει ευθύνη από νομική άποψη για τέτοιου είδους αξιώσεις βάσει του παρόντος εγγράφου.

Leírás

A Sheer White!® fogfehérítőcsíkok a legkényelmesebb, beteg barátságos fogfehérítő rendszer ami manapság létezik. Ezek a csíkok úgy voltak tervezve hogy 1-től 2 óráig a fogakhoz tapadjanak, hogy kihasználják a szabadalmazott karbamid-peroxidkészítményt.

FIGYELEM: 30 percen aluli eltávolítás lehetséges, de sokkal nehezebb, a csíkok elszakadhatnak és darabokban jönnek le.

Ellenjavallatok

- Ne dohányozzon a fogfehérítés alatt.
- Kerülje el a szemmel való érintkezést. Ha az érintkezés véletlenül megtörténik, öblítse bő vízzel.
- Kerülje el a közvetlen érintkezést a csík aktív felülete között és az íny és / vagy nyál áramlásával.
- Nem használható terhes vagy szoptató nőknek.
- Nem használható 18 éven aluliaknak.
- Kerülje el a ruhákkal való érintkezést.
- Ne nyelje le a csíkot.
- Ha a fogíny vagy a száj irritációja (mint például bőrpír, duzzanat, fájdalom), előfordul, állítsa meg a használatot és kérje ki fogorvosa véleményét.
- Ha őrli a fogát, ne viselje egyik napról a másikra.
- Ne használja ha allergiás peroxidokra, mint például hidrogén-peroxid.
- Ne használja több mint 5 napot egy kezelés alatt.
- A fogfehérítés nem befolyásolja a porcelán koronákat és héjakat, fogszínű akril vagy amalgámtöméseket.

Tárolás és Kezelés

- Maximális eltarthatóságért tartsa hűtőben a terméket.
- Ne tárolja 5°C felett. Nem fagyasztható. Használhatja a címkén lévő időpontig.
- Ne használja ha a csomagolás sérült, vagy ha a tömítésekkel voltak törve vagy nyitva.
- 15% kezdeti koncentrációjú karbamid-peroxid. A koncentráció változhat a peroxid természete miatt és az egyedülálló összetétel miatt.

Eltarthatóság: 36 hónap


	Figyelem-Olvassa el a használati utasítást és a teljes információt.
	Oxidáló hatású- Kérjük kerülje az érintkezést reaktív anyagokkal.
STORAGE  1°C - 5°C	Tárolási hőmérséklet-Tárolja a terméket az előírt hőmérsékleten.



Vegye ki a szalagot a tálcából. Távolítsa el a fehér papír a szalagról. A fehér papír papírszalagot ellátott szalag oldala a fogakra alkalmazott oldal.



Tegye középre a csíkot és tapassza a fogakhoz az íny vonalában.

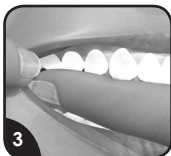

Húzza el arcát és nyomja vissza a csíkot a hátsó fogakra.



Hajtsa össze a csíkot a fogak hátsó oldalára. Nyomja oda erősen minden felületre.



Eltávolításához fogja meg a csík egyik sarkát, és húzza le távol az elülső fogakról, majd nyomja le a csíkot távol a hátsó fogaktól.



Kefélje vagy öblítse le a maradék gélt. Öblítse a mosdó táiban.



Jogi nyilatkozat: CAO Group pontosnak véli ezt az információt és csupán az ügyfelek javára kínálja, a termék használatára tiltott feltételek alatt. Ez a dokumentum nem tekinthető garanciának vagy nem garantálja a termék teljesítményét, és a CAO Group jogilag nem köteles semmilyen igényeket teljesíteni a dokumentum alapján.

Beschrijving

Sheer White![®] blekende lagen is het meest comfortabele, patiëntvriendelijke blekingssysteem dat nu beschikbaar is. Deze lagen zijn gemaakt om 1 a 2 uur aan de tanden te plakken om de eigenschappen van de carbamide peroxide samenstelling te benutten.

LET OP: Verwijdering eerder dan 30 minuten is mogelijk, maar is moeilijker, samenstelling kan afbreken en er in stukjes afaan.

Contra-indicaties

- Niet roken tijdens de blekingsbehandeling.
- Vermijd contact met ogen. Als er zich contact met ogen voordoet, spoelen met overvloedig water.
- Vermijd contact met het actieve oppervlakte van het laagje met tandvlees en/of speekselvloed.
- Niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Niet geschikt voor personen onder de 18.
- Vermijd contact met kleding.
- Het laagje niet inslikken.
- Als irritatie (zoals roodheid, zwelling of pijn) aan het tandvlees of de mond verschijnt, stop het product en raadpleeg een tandarts.
- Als u tandenknars of last van bruxisme heeft, niet 's nachts gebruiken.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor peroxiden als waterstofperoxide.
- Niet langer dan 5 dagen per behandeling gebruiken.
- Bleken heeft geen invloed op porseleinen kronen en vernis, tandkleurige acryle of amalgaamvullingen.

Bewaren & Gebruik

- Houd het product gekoeld voor maximale houdbaarheid.
- Niet bewaren boven de 5°C. Niet invriezen. Optimaal gebruik voor datum op etiket.
- Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is of de verzegeling verbroken of geopend blijkt te zijn.
- 15% initiële concentratie van carbamide peroxide. De concentratie kan veranderen vanwege de aard van de concentratie en de unieke samenstelling ervan.

Houdbaarheid: 36 maanden


	Let op–Raadpleeg de gebruiksinstructies voor meer informatie.
	Oxidatiemiddel–Vermijd contact met reactieve substanties.
	Opslagtemperatuur–Product op de aangegeven temperatuur bewaren.



Verwijder de strip uit de lade. Verwijder de witte papieren voering uit de strip. De zijkant van de strip met de papieren voering is de kant die op de tanden moet worden aangebracht.



Zet de laag in het midden en plaats het tegen de tanden op de rand van het tandvlees.

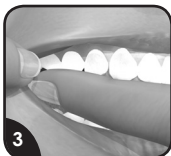

Trek de wang weg en duw de laag op de achterste tanden.



Vouw de laag terug om de achterkant van de tanden. Stevig aandruwen op gehele oppervlakte.



Om te verwijderen, pakt u een hoek vast en trek weg van de voorkant van de tanden, duw de laag vervolgens weg van de achterkant van de tanden.



Poets of spoel eventuele overgebleven gel weg. Afspoelen in wastafel.



Voorbehoud: CAO Group is van mening dat deze informatie juist is en aangeboden wordt in het belang van de klanten voor gebruik van het product volgens beschreven voorwaarden. Dit document geldt niet als productgarantie en CAO Group is niet wettelijk aan claims gebonden op basis van dit product.

Beskrivelse

Sheer White![®] blekingofilmbelegg er det mest komfortable og pasientvennlige blekingssystemet vi har i dag. Disse filmbeleggene er designet for å festes på tennene i 1-2 timer for å få utbytte av karbamidperoksid-løsningen som de inneholder.

OBS: du kan fjerne filmen før det har gått 30 minutter, men dette er vanskeligere, det kan revne og komme av i biter.

Kontraindikasjoner

- Ikke røyk under blekingen.
- Unngå å få det på øyene. Skyll med mye og mange omganger med vann dersom dette oppstår.
- Unngå å få kontakt mellom blekefilmens aktive overflate og tannkjøttet og/eller spytt.
- Ikke for kvinner som er gravide eller som ammer.
- Ikke for personer under 18 år.
- Unngå å få produktet på klær.
- Ikke svelg blekefilmen.
- Hvis det oppstår en irritasjon (rødfarge, opphovning, sårhet) på tannkjøttet bør du slutte å bruke produktet og konsultere tannlegen.
- Ikke sov med filmbelegget hvis du skjærer tenner.
- Ikke bruk produktet dersom du er allergisk mot peroksidstoffer som hydrogenperoksid f.eks.
- Ikke bruk i mer enn 5 dager per behandling.
- Bleking påvirker ikke porselenkroner og skallfasetter, tannfargede akrylrestaureringer eller amalgam.

Oppbevaring & Håndtering

- Oppbevar produktet kjølig (i kjøleskapet) for lengst mulig holdbarhet.
- Ikke oppbevar over 5°C. Ikke frys ned. Bruk produktet helst før datoen som står oppført på etiketten.
- Ikke bruk dersom forsegling eller innpakningen har blitt skadet eller åpnet.
- 15% konsentrasjon karbamidperoksid. Konsentrasjonen kan endre seg på grunn av hvordan peroksid oppfører seg og med tanke på denne unike formelen.

Holdbarhet: 36 måneder


	Obs – Les instruksene for bruk og fullstendig informasjon.
	Oksidant – Unngå kontakt med reaktive stoffer.
	Oppbevaringstemperatur – Lagre produktet til indikert temperatur.



Fjern stripen fra skuffen. Fjern hvitpapirforingen fra stripen. Siden av stripen som hadde papirforingen er siden som skal gjelde for tennene.



Få filmen midt på og legg filmen på tennene ved kanten mot tannkjøttet.

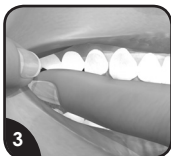


Dra kinnet vekk mens du plasserer filmen på tennene bak.



Brett filmen til tennenes bakside. Trykk ordentlig på alle overflater.



Ta tak i et hjørne og dra vekk fra tennenes fremside og skubb filmen vekk fra baksiden av tennene.

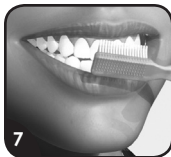

Puss eller skyll vekk gelerester. Skyll i vasken.

NO

Ansvarsfraskrivelse: CAO Group tolker denne informasjonen som sann og at den kun tilbys til kunders fordel under forskrevne forhold. Dette dokumentet skal ikke betraktes som en garanti på produktets resultat, og CAO Group er ikke juridisk forpliktet til påstandene innunder dette dokumentet.

Opis

Paski wybielające Sheer White!® są najbardziej wygodnym i przyjaznym dla pacjenta systemem wybielającym dostępnym na dzisiejszym rynku. Paski przylegają do zębów przez 1 - 2 godziny, w pełni wykorzystując właściwości kompozycyjne nadtlenu karbamidu.

UWAGA: Paski mogą być usunięte przed upływem 30 minut, lecz może to utrudnić procedurę i doprowadzić do rozdarcia pasków.

Przeciwwskazania

- Podczas wybielania nie wolno palić tytoniu.
- Należy unikać kontaktu z oczami. W razie przedostania się produktu do oczu należy przepłukać obficie wodą.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu powierzchni aktywnej paska z dziąsłami lub wylotami śliny.
- Nie stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.
- Nie zaleca się stosowania u osób poniżej 18 roku życia.
- Unikać kontaktu z odzieżą.
- Nie połykać pasków.
- W razie podrażnienia (takiego jak zaczerwienienie, opuchlizna, wrażliwość) dziąseł lub ust należy zaprzestać używania produktu i skontaktować się z dentystą.
- W przypadku bruksizmu lub tarcia zębów nie zaleca się stosowania w nocy.
- Nie stosować u osób uczulonych na nadtlarki, takie jak nadtlenek wodoru.
- Nie stosować dłużej niż 5 dni podczas jednej kuracji.
- Wybielaniu nie ulegają korony porcelanowe i licówki, wypełnienia w kolorze zębów zawierające akrylowe żywice kompozytowe i wypełnienia amalgamatowe.

Przechowywanie

- Przechowywać w niskiej temperaturze w celu zachowania maksymalnego okresu trwałości.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 5°C. Nie zamrażać. Użyć przed upływem daty ważności podanej na opakowaniu.
- Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub jeśli plomba została naruszona lub złamana.
- Początkowe stężenie nadtlenu karbamidu wynosi 15%. Stężenie może ulec zmianie z uwagi na specyfikę nadtlenu i jego unikalną formułę.

Okres trwałości: 36 miesięcy


	Uwaga – Należy stosować się do sposobu użycia i innych informacji.
	Utleniacz – Unikać kontaktu z substancjami reaktywnymi.
	Temperatura przechowywania – Przechowywać we wskazanej temperaturze.



Usunąć taśmę z tacy. Usunąć białą papierową wkładkę z taśmą. Bok taśm, który miał papierową wkładkę, jest stroną do nałożenia na zęby.



Wyśrodkować pasek i umieścić na linii dziąseł.

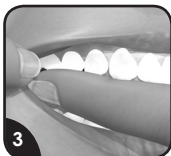

Odchylić policzek i nałożyć pasek na tylne zęby.



Zwinąć pasek pod spód zębów. Przycisnąć mocno na całej powierzchni zębów.



**Stosować przez
1 - 2 godziny**



Aby usunąć, należy chwycić za jeden róg i odkleić najpierw od zewnętrznej powierzchni zębów, a następnie od spodu.



Należy wyczyścić lub wypłukać pozostałości żelu. Wypłukać do zlewu.



Wyłączenie odpowiedzialności: Firma CAO Group wierzy, że informacja zawarta w niniejszym dokumencie jest właściwa i przedstawiona wyłącznie dla korzyści klientów w celu zapewnienia prawidłowego użycia produktu. Niniejszy dokument nie stanowi gwarancji dla działania produktu, a firma CAO Group nie jest prawnie zobowiązana do jakichkolwiek roszczeń przedstawionych na podstawie tego dokumentu.

Descrição

Sheer White!® As fitas branqueadoras são o sistema de branqueamento mais confortável e amigável atualmente disponível. Estas fitas são projetadas para aderir aos dentes durante 1 a 2 horas para aproveitar as propriedades da composição de peróxido de carbamida.

ATENÇÃO POR FAVOR: pode ser feita a remoção antes de 30 minutos, mas é mais difícil, pode rasgar e sair aos pedaços.

Contraindicações

- Não fume durante o tratamento de branqueamento.
- Evite o contato com os olhos. Se ocorrer o contato, lave com água abundante.
- Evite o contato direto da superfície ativa da fita com a gengiva e/ou o fluxo salivar.
- Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou em período de amamentação.
- Não deve ser utilizado por menores de 18 anos.
- Evite o contato com as roupas.
- Não engula a fita.
- Se ocorrer irritação (tais como vermelhidão, inchaço, dor) das gengivas ou boca, interrompa a utilização e consulte um dentista.
- Se ranger os dentes, não use durante a noite.
- Não utilize se for alérgico aos peróxidos como peróxido de hidrogénio.
- Não utilize durante mais de 5 dias de cada vez.
- O branqueamento não afeta as facetas e coroas de porcelana, restaurações de acrílico coloridas ou a amálgama do dente.

Armazenamento & Manipulação

- Manter o produto refrigerado para manter o máximo de vida útil.
- Não armazenar acima dos 5°C. Não congele. Melhor utilização antes da data na etiqueta.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada, ou se os selos estiverem quebrados ou abertos.
- Concentração inicial de 15% de peróxido de carbamida. A concentração pode mudar devido à natureza do peróxido e à sua fórmula única.

Prazo de validade: 36 meses


	Atenção - Consulte as instruções de utilização e informação completa.
	Oxidante - Evitar contato com substâncias reativas.
	Temperatura de Armazenamento –Guarde o produto à temperatura indicada.



1
Remova a tira da bandeja. Remova o forro de papel branco da tira. O lado da tira que tinha o forro de papel é o lado a aplicar aos dentes.



2
Centre a fita e coloque contra os dentes na linha da gengiva.

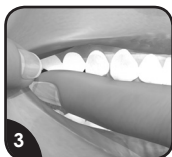

3
Afaste a bochecha e empurre a fita para os dentes de trás.



4
Dobre a fita para os dentes de trás. Pressione firmemente em todas as superfícies.



5
**Usedurante
1-2 horas**



6
Para retirar, segure num canto e puxe para baixo, distancie da frente dos dentes e, em seguida, afaste a fita de trás dos dentes.



7
Escove ou enxague qualquer gel remanescente. Coloque no lixo.



Isenção de responsabilidade: O CAO Group acredita que esta informação seja precisa e é oferecido apenas para o benefício dos seus clientes para o uso do produto em condições de prescrição. Este documento não é considerado uma garantia ou garantia de desempenho do produto, e CAO Group não está legalmente vinculado a tais reivindicações baseadas neste documento.

Descriere

Benzile de albire Sheer White![®] reprezintă cel mai confortabil, ușor de folosit sistem de albire disponibil în prezent. Aceste benzi sunt concepute pentru a adera la dinti timp de 1 până la 2 ore pentru a profita de compoziția specială de peroxid de carbamidă.

VĂ RUGĂM REȚINEȚI: Îndepărtarea înainte de 30 minute este posibilă, dar este mult mai dificilă, benzile se pot rupe și desprinde în bucăți.

Contraindicații

- Nu fumați în timpul tratamentului de albire.
- Evitați contactul cu ochii. În cazul contactului, clătiți abundent cu apă.
- Evitați contactul direct al suprafeței active a benzii cu gingiile și / sau fluxul salivar.
- Nu este pentru uzul femeilor însărcinate sau celor care alăptează.
- Nu este pentru uzul persoanelor sub 18 ani.
- Evitați contactul cu îmbrăcămintea.
- Nu înghițiți banda.
- Dacă apare iritația (cum ar fi roșeața, umflarea, durerea) gingiilor sau a gurii, întrerupeți folosirea și consultați un medic stomatolog.
- Dacă vă măcinați dinții, evitați purtarea benzii peste noapte.
- Nu folosiți dacă sunteți alergic la peroxizi precum preoxidul de hidrogen.
- Nu folosiți mai mult de 5 zile pe durata unui tratament.
- Albirea nu va afecta coroanele de porțelan și furnir, plombele acrilice de culoarea dintelui sau amalgam.

Depozitare și manipulare

- Păstrați produsul la frigider pentru a menține durata de viață maximă de depozitare.
- A nu se păstra la temperaturi de peste 5°C. A nu se îngheța. A se utiliza înainte de data înscrisă pe etichetă.
- A nu se utiliza dacă ambalajul a fost deteriorat, sau dacă sigiliile au fost rupte sau deschise.
- 15% concentrație inițială de peroxid de carbamidă. Concentrația poate varia în funcție de natura peroxidului și în funcție de această formulă unică.

Perioada de valabilitate: 36 de luni


	Atenție- Consultați instrucțiunile de utilizare și informațiile complete.
	Oxidant- Evitați contactul cu substanțe reactive.
	Temperatură de păstrare- Păstrați produsul la temperatura indicată.



1 Scoateți banda din tavă. Scoateți garnitura de hârtie albă de pe bandă. Partea benzii care avea stratul de hârtie este partea care se aplică la dinți.



2 Centrați banda și atașați-o de dințila linia de masticație.

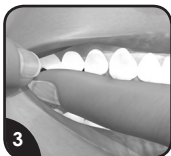

3 Trageți obrazul deoparte și apăsați banda pe dinții din spate.



4 Îndoți banda pe partea posterioară a dinților. Apăsați ferm pe toate suprafețele.



**Purtați pentru
1-2 ore**



6 Pentru îndepărtare, prindeți de un colț și trageți în jos departe de fata anterioară a dinților, apoi îndepărtați banda de pe partea posterioară a dinților.



7 Periați sau clătiți pentru a îndepărta gelul rămas. Clătiți în chiuvetă.



Act de Renunțare: CAO Group consideră că aceste informații sunt corecte și sunt oferite doar pentru beneficiul clienților pentru utilizarea produsului în condițiile prevăzute. Acest document nu reprezintă o asigurare sau garanție a performanțelor produsului, și CAO Group nu este obligat prin lege să răspundă la cerințe/reclamații bazate pe acest document.

Beskrivning

Blekningssremсор i serien Sheer White![®] är det mest bekväma, användarvänliga blekningssystemet på marknaden idag. Dessa remsorska sitta kvar på tänderna i 1 till 2 timmar så att den patentskyddade sammansättningen med karbamidperoxid ska få tid att verka.

OBSERVERA: det går att ta bort remsorna före 30 minuter har gått men det är svårare och filmen kan gå sönder och falla av i bitar.

Kontraindikationer

- Rök inte undertandblekningen.
- Undvik kontakt med ögonen. Om kontakt ändå skulle uppstå, skölj med rikligt med vatten.
- Undvik direktkontakt mellan filmens aktiva yta och tandköttet och/eller salivflödet.
- Bör ej användas av gravida eller kvinnor som ammar.
- Får ej användas av personer som är yngre än 18 år.
- Undvik kontakt med kläderna.
- Svälj inte remsorna.
- Om det skulle uppstå en allergisk reaktion (som t.ex. rodnad, svullnad, ömhet) på tandköttet eller i munnen, avbryt behandlingen och rådfråga tandläkare.
- Om du gnisslar eller biter ihop med tänderna hårt under natten ska du inte användaremsorna på natten.
- Använd inte om du är allergisk mot peroxider som t.ex. väteperoxid.
- Använd inte längre än fem dagar åt gången.
- Blekning påverkar inte porslinskronor eller faner, tandfärgade akryllagningar eller amalgam.

Förvaring och hantering

- Förvaras i kylskåp för maximalhållbarhet.
- Förvaras ej över 5°C. Frys ej. Bästa-föredatum står på etiketten.
- Använd inte om förpackningen är trasig eller om förseglingarna är trasiga eller öppna.
- 15% initial koncentration av karbamidperoxid. Koncentrationen kan ändras på grund av peroxidens egenskaper och den unika sammansättningen.

Hållbarhet: 36 månader


	Observera - Se instruktionerna om hur produkten ska användas samt komplett information.
	Oxideringsmedel - Undvik kontakt med reaktiva ämnen.
	Förvaringstemperatur - Förvara produkten vid angiven temperatur.



1
Ta bort remsan från facket. Ta bort pappersfodret från remsan. Den sida av remsan som hade pappersfodret är den sida som ska appliceras på tänderna.



2
Placera remsan i mitten och tryck på den på tänderna längs tandkötslinjen.

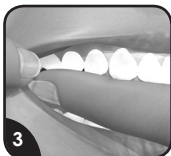

3
Håll tillbaka kinden och tryck remsan mot de bakre tänderna.



4
Vik remsan mot baksidan av tänderna. Tryck fast på alla ytor.



5
**Låt produkten
sitta på i
1-2 timmar**




6
När produkten ska tas bort, ta tag i hörnet och dra ner och bort den från framsidan av tänderna, skjut sedan remsan bort från baksidan av tänderna.



7
Borsta eller skölj bort rester av gel. Skölj ner i handfatet.




Ansvarsfriskrivning: CAO Group anser att denna information är riktig och tillhandahåller den endast till förmån för sina kunder för användning av produkten under angivna förhållanden. Detta dokument ska inte betraktas som garanti för ett visst resultat och CAO-gruppen är inte juridiskt skyldig att uppfylla dylika krav baserat på detta dokument.

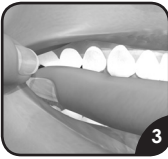

اسحبوا الخدَّ بعيداً ثم ادفعوا
بالشريط إلى خلف الأسنان.



قوموا بوضع الشريط في
المنتصف فوق الأسنان مقابل
خط اللثة.

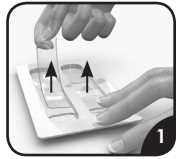

أخرج الشريط من الدرج. انزع
بطانة الورقة البيضاء من الشريط.
جانب الشريط الذي كان به بطانة
الورق هو الجانب الذي ينطبق
على الأسنان.



لإزالته، اقبضوا على جانب واحد
ثم قوموا بالسحب إلى الأسفل
بعيدا من مقدّم الأسنان، ثم بعد
ذلك ادفعوا الشريط بعيداً عن
مؤخّر الأسنان.



قوموا بلبسه مدة
1 إلى 2 ساعة.



قوموا بثنّي الفيلم إلى الجانب
الخلفي للأسنان. اضغطوا بقوة
على كافة الواجهات.



نظفوا بالفرشاة أو اشطفوا أي
هلام متبقٍ. قوموا بالتنظيف
في المغسلة.

AR

تنويه: مجموعة CAO تؤمن بأن هذه المعلومات دقيقة، وهي معروضة فقط من أجل استفادة زبائننا من استعمال هذا المنتج تحت الشروط المذكورة. هذه الوثيقة لا يمكن أن تعتبر كضمان أو أن تضمن فعالية المنتج، كما أن مجموعة CAO هي غير ملزمة قانوناً لمثل هذه الادعاءات بناء على هذه الوثيقة.

وصف

أشربة التبييض® Sheer White هي نظام تبييض الأسنان الصديق للمرضى والأكثر إراحة المتوفر حاليا. لقد صُممت هذه الأشربة لتلتصق بالأسنان مدة ساعة 1 أو ساعتين 2 من أجل الاستفادة من خاصية تركيبة بيروكسيد الكارباميد.

ملاحظة: يمكن إزالة الشريط قبل 30 دقيقة، إلا أنه قد يكون مؤلما قليلا؛ حيث يمكن أن يسيل الدموع أو قد تتم إزالته على شكل قطع.

تعليمات مضادة

- لا يجب التدخين أثناء علاج التبييض.
- تجنب ملامسة العينين. إذا كان هناك اتصال، يرجى الدَّق باستعمال كميات مياه وفيرة.
- تجنب الاتصال المباشر للواجهة النشطة للشريط باللثة و/أو تدفق اللعاب.
- لا يجب استعماله من طرف النساء الحوامل أو المرضعات.
- لا يجب استعماله من طرف الأشخاص دون سن 18.
- تجنب الاتصال مع الملابس.
- لا تبتلعوا الفيلم.
- في حالة تهيج باللثة أو بالفم (مثل احمرار، تورم، ألم)، يرجى التوقف عن الاستعمال مباشرة واستشارة طبيب الأسنان.
- إذا كنتم تكشرون وتصورون على أسنانكم، لا يجب الاستعمال أثناء الليل.
- لا يجب الاستعمال إذا كانت هناك حساسية تجاه البيروكسيد مثل هيدروجين البيروكسيد.
- لا يجب الاستعمال أكثر من 5 أيام لكل حمية.
- التبييض لا يؤثر على تيجان البورسولين الصناعية للأضراس والأغشية، الأسنان الملونة بترميمات الأنسجة الصناعية أو المعدن المخلوط بالزئبق.

التخزين والاستعمال

- حافظوا على المنتج مبرداً من أجل مدة صلاحية أقصى.
- لا يجب تخزينه في درجة حرارة أعلى من 5° درجات. لا يجب تجميده. أحسن استعمال هو قبل تاريخ الانتهاء المحدد على الملصق.
- لا يجب الاستعمال إذا تعرض للتلف، أو إذا ثبت أن شريط الضمان قد تعرض للتلف، التمزيق أو الفتح.
- 15% تركيز أولي لمادة بيروكسيد الكارباميد. قد يتغير التركيز بسبب طبيعة البيروكسيد وكذا هذه الصيغة الفريدة.

مدة الصلاحية: 36 شهر الق

انتباه: يرجى مراجعة تعليمات الاستعمال والمعلومات الكاملة.	
مادة مؤكسدة: تجنب الاتصال بالمعادن المتفاعلة.	
درجة حرارة التخزين: يرجى تخزين المنتج في درجة الحرارة المشار إليها.	STORAGE 5°C 1°C

Patent Pending

**Caution: Regulations restrict dispensing of
this product to a licensed dental professional.**



Delico B.V.
Burg. Scholijlaan 36
2908 LS Capelle a/d IJssel
The Netherlands
Ph: +31104511183

Manufactured by CAO (China) Medical Equipment Co., Ltd. for



CAO GROUP, INC.
Easier · Faster · Better™

P 877.236.4408 F 801.256.9287

4628 West Skyhawk Drive, West Jordan, UT 84084-4501 U.S.A.
www.caogroup.com